



# Entrée Elegance

einfach starker Standard



# BREEZY


INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE



# Entrée - der Standardstahlrollstuhl

## Ganz schön robust!

Der Breezy Entrée macht seinem Namen alle Ehre. Ein Standardstuhl, der nicht nur durch eine breite Palette an Ausstattungen überzeugt, sondern auch optisch einen starken Eindruck hinterlässt. Doch der neue **Standardstuhl** von Sunrise kann es nicht nur in Sachen Design mit Vielen aufnehmen, der Breezy Entrée ist auch ganz schön hart im Nehmen. Der Stahlrahmen sorgt für optimale Stabilität und gute Fahreigenschaften. Das pannensichere Antriebsrad und ein Vollgummi Lenkrad geben beruhigende Sicherheit im harten Alltag. Die gepolsterte Sitz- und Rückenbespannung gewährleistet, dass der Alltag nicht nur sicher sondern auch komfortabel ist.



HMV-Nr.: 18.50.02.0089

## Starke Lösungen – überraschend einfach



Trommelbremse  
optional



2 Sitzhöhen einstellbar  
(47 cm und 51 cm);  
dient auch als  
Radstandsverlängerung



Seitenteil hochschwenkbar



Gepolsterte Sitz- und  
Rückenbespannung

Der Breezy Entrée beeindruckt mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, die kinderleicht umgesetzt werden können. Der neue Achsadapter ist das Multitalent schlechthin. Nach hinten eingebaut wird er zur integrierten Radstandsverlängerung, durch einfaches Versetzen nach oben kann die Sitzhöhe stufenweise von 47 bis 51 cm variiert werden. Und auch die Armauflage hat es in sich. Durch nach vorne anbauen wird aus der kurzen, festen Armauflage eine lange Auflage und genauso einfach funktioniert es auch bei der höhenverstellbaren Armlehne. Einfach seitenverkehrt einbauen und schon verwandelt sich die kurze Armauflage in eine lange.

Der neue Breezy Entrée einfach überzeugend – überzeugend einfach.

**Der Standard-Stahlstuhl der Zeichen setzt!**

# BREEZY

## Elegance - der Standardleichtgewichtrollstuhl




HMV-Nr.: 18.50.02.2084

### Zeichen setzen, Trends vorgeben

Der Breezy Elegance von Sunrise Medical definiert Standard neu. Ob SitzhöhenEinstellung, abschwengbare Fußrasten, lange oder kurze Armauflage, winkelverstellbares Fußbrett oder Radstandsverlängerung – der Breezy Elegance hat alle Ausstattungen schon serienmäßig integriert. Und dazu überzeugt das neue **Standard-Leichtgewicht** auch durch ein Minimum an Gewicht bei einem Maximum an Stabilität.

## Viele Einstellmöglichkeiten – und das alles als Standard

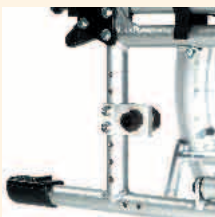

SitzhöhenEinstellung  
und Radstands-  
verlängerung



Sicherheitsräder  
hochschwenkbar



Armauflage  
höhenverstellbar



Winkelverstell-  
bares Fußbrett



Hochschwenkbare  
Fußraste



Sitzwinkel einstellbar  
von 0°, 3°, 6°

Der Breezy Elegance besticht mit einem Optimum an Funktionalität bei größtmöglicher Individualität: Von der niedrigsten Sitzhöhe mit 42 cm, ideal zum Mittrippeln, bis zu 51 cm kann die Sitzhöhe in fünf Stufen individuell auf die Anforderungen des Benutzers angepasst werden. Und das ohne zusätzliche Anbauteile. (Alles mit 24" Antriebsrad und 8" Lenkrad realisierbar)

### Individualität als Konzept

Sie sind sich nicht sicher, ob eine kurze oder lange Armauflage mehr Komfort bietet? Kein Problem!

Ohne Zubehör lässt sich die kurze Armauflage in eine lange umrüsten. Gleiches gilt auch für die höhenverstellbare Armauflage (auch hier ohne zusätzliche Teile).

Und mit nur 16 kg Gesamtgewicht lässt sich der Breezy Elegance leicht verstauen und überall hin mitnehmen.

Wie beim Breezy Entrée ist die Fußraste nach innen und außen schwenkbar, auch die Unterschenkellänge lässt sich individuell einstellen. Zusätzlich ist das Fußbrett winkelverstellbar (optional Fußraste hochschwenkbar).

# BREEZY

	<b>Entrée Standard-Stahl</b>	<b>Elegance Standard-Leichtgewicht</b>
Sitzbreite	38, 41, 44, 47, 50 cm	38, 41, 44, 47, 50 cm
Sitztiefe	43 cm	43 cm
Sitzhöhe	47 cm (auf 51 cm einstellbar)	47,5 cm (42 - 51 cm einstellbar)
Rückenhöhe	43 cm	43 cm
Gewicht	19,5 kg	16 kg
Maximale Zuladung	125 kg	125 kg

Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr.: **18.50.02.0089**

**18.50.02.2084**

## Standard, wie wir ihn verstehen:

- Einfache Bestellung über Kanban und Internet (Produkt/Ersatzteile)
- Digitale Ersatzteilkataloge
- Einfaches Ersatzteil-Handling
- Einfache Nachrüstung von Optionen

## Sehr hohe Standardausführung für beide Stühle:

- Steckachse
- Gepolsterte Sitz- und Rückenbespannung
- Armauflage kurz/lang integriert
- Lenk-/Antriebsrad pannensicher
- Integrierte Radstandsverlängerung
- Seitenteil hochschwenkbar

## Der Breezy Elegance hat zusätzlich noch:

- Seitenteil hochschwenkbar und abnehmbar
- Winkelverstellbares Fußbrett

## Optionen:

- Armauflage höhenverstellbar
- Trommelbremse
- Hochschwenkbare Fußraste
- Sitzkissen
- Sicherheitsräder
- Beckengurt
- Stockhalter

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.

## Das Baukastensystem für maximale Kompatibilität

Breezy Entrée und Breezy Elegance sind so konzipiert, dass möglichst viele Gleichteile bei beiden Stühlen zum Einsatz kommen. Hierzu zählen die Sitz- und Rückenbespannung, das Lenkrad, die feste oder höhenverstellbare Armauflage, der Achsadapter und die Steckachse.

Die Standard-Fußraste und das Antriebsrad sind an beiden Modellen austauschbar.

Weniger Teile, weniger Umbauaufwand, geringe Lagerhaltung – Standard wie wir ihn verstehen!



**KNOWLEDGE FOR THE FUTURE**



Sunrise Medical GmbH & Co. KG  
Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/Heidelberg  
Telefon 0 72 53 / 9 80-0  
Telefax 0 72 53 / 9 80-111  
www.sunrisemedical.com



**INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE**